


NSK

CREATE IT.

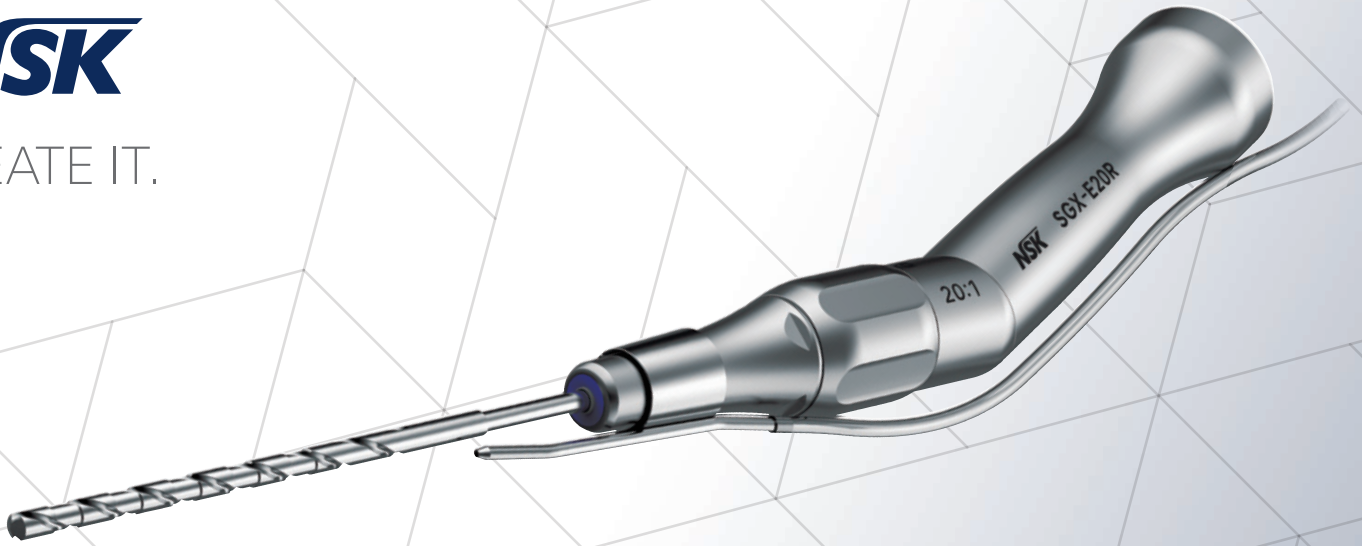

SGX-E20R

PIEZAS DE MANO PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS

Soluciones fáciles y eficientes para implantes zigomáticos y pterigoideos

El SGX-E20R hará que los procedimientos con implantes zigomáticos y pterigoideos sean más sencillos y eficientes. Benefíciense de la forma especialmente diseñada para procedimientos de implantes zigomáticos y pterigoideos. El sistema de sellado especial diseñado por NSK en la punta del instrumento previene que la contaminación generada en cualquier procedimiento acceda al interior del mismo y su superficie lisa facilita la limpieza del instrumento.

Ángulo óptimo para implantes zigomáticos


Comparado con los contra-ángulos de cirugía convencionales. El SGX-E20R está específicamente angulado para optimizar el acceso al hueso zigomático y mejorar la visibilidad.





Sistema de irrigación externo gracias al suministro de agua externo

El sistema de irrigación externo del SGX-E20R enfría el área de tratamiento y la fresa eficientemente.

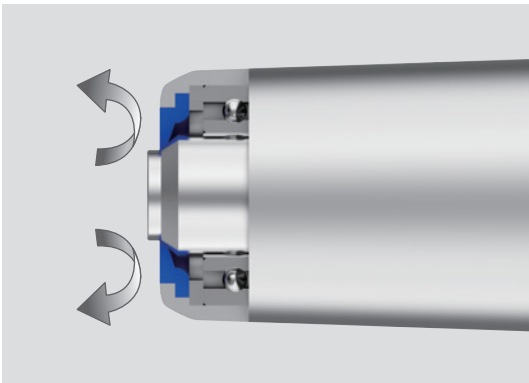

Sistema de sellado original

La prevención de entrada de materiales contaminantes en el interior del instrumento hace que la limpieza más sencilla prolongando así la vida del instrumento.

Reducción 20:1

No Óptico MODELO: **SGX-E20R** CÓDIGO DE PEDIDO : **HA1200**

- Cuerpo de acero inoxidable ● Velocidad máx. : 2,000 min⁻¹
- Torque máx. : 50 Ncm ● Portafresas giratorio ● Pieza de mano en ángulo
- Sistema de irrigación externo ● Para preparación/colocación de implantes zigomáticos y pterigoideos en cirugía Maxilofacial/cirugía oral



Lavable en termodesinfectadora



Esterilizable con autoclave hasta 135°C

NAKANISHI INC. www.nsk-dental.com

700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan TEL: +81 289 64 3380 FAX: +81 289 62 5636

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Strasse 8
65760 Eschborn, Germany
TEL: +49 6196 776060
FAX: +49 6196 7760629

NSK France S.A.S.

32 rue de Lisbonne
75008 Paris, France
TEL: +33 1 56 79 59 80
FAX: +33 1 56 79 59 81

NSK United Kingdom Ltd.

Office 4, Gateway 1000, Arlington Business Park
Whittle Way, Stevenage, SG1 2FP, UK
TEL: +44 1438 310670
FAX: +44 1438 310671

NSK Dental Spain S.A.

C/Módena, 43 El Soho-Európolis
28232 Las Rozas de Madrid, Spain
TEL: +34 91 626 61 28
FAX: +34 91 626 61 32

NSK Dental Italy S.r.l.

Via dell'Agricoltura 21
36016 Thiene VI, Italy
TEL: +39 0445 820070
EMAIL: info@nsk-italy.it